

EyeSpecial C-IV

SHOFU Cross Polarizer

FR

☞ Lire attentivement les « Consignes de sécurité importantes » de l'EyeSpecial C-IV avant d'utiliser le polariseur croisé.

☞ Ce produit est exclusivement destiné aux modèles EyeSpecial C-IV et ultérieurs. Il est incompatible avec les modèles précédents EyeSpecial C-II et C-III.

Utilisation

Faire ressortir avec netteté l'état de surface ou la structure interne des dents naturelles, comme la structure mamelonnaire ou des fissures, qui peuvent difficilement se voir en prise de vue normale.

Préparation

Activer le mode polarisation croisée avant d'utiliser le polariseur pour la première fois (l'activation ne sert qu'une seule fois).

1. Activation du mode polarisation croisée

Scanner le code QR ci-dessous pour l'activer.

Lorsque le message « Changer fonct. optionnelle ? » s'affiche, appuyer sur « OK ».



Code QR pour activer le mode polarisation croisée

2. Sauvegarder en mode personnalisé

Scanner le code QR ci-dessous pour enregistrer le mode polarisation croisée en tant que mode personnalisé. Lorsque le message « Sélection onglet » apparaît, sélectionner l'un des trois paramètres personnalisés.

Bien contrôler que l'appareil photo soit en mode prise de vue (l'un des 9 modes préinstallés), car les codes QR ne peuvent pas être scannés en mode personnalisé.




Code QR pour enregistrer un mode personnalisé

Comment prendre une photo

1. Sélectionner le paramètre personnalisé

Vérifier que l'icône du mode personnalisé correspondant s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran avant de prendre la photo.

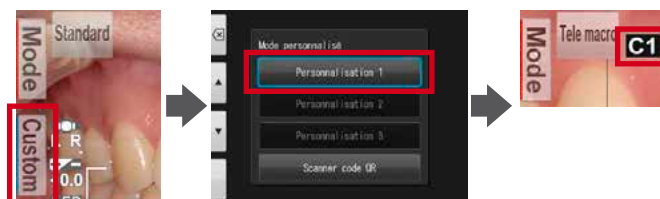


2. Montage de la bonnette d'approche

Monter la bonnette sur l'objectif de la caméra en la faisant pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fixée.

3. Pose du polariseur croisé

Placer le SHOFU Cross Polarizer sur la bonnette jusqu'à entendre un clic de verrouillage.

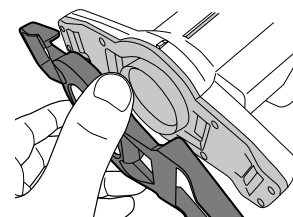


4. Prise de photo

Les procédures sont les mêmes qu'en mode Télé-Macro. Se référer au manuel d'utilisation de l'EyeSpecial C-IV.

5. Dépose du polariseur croisé


Pour retirer le polariseur, soulever doucement le loquet de chaque côté de l'appareil et pousser le polariseur vers l'extérieur.

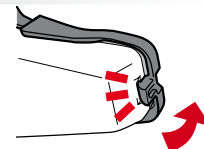

Comment scanner un code QR



1 Appuyer sur [Custom] ou sur la touche F2 en mode prise de vue

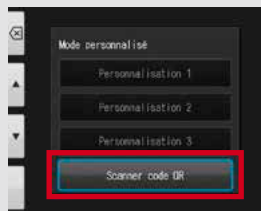

2 Sélectionner « Scanner code QR »



3 Presser le déclencheur qui lance la numérisation



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com